

CMFiX[®] 2 Plate

ラグスクリューとの干渉を避けるため、
プレート遠位側仮固定用ホールが1か所
から2か所に変更
(Φ1.0 mm K 鋼線使用可能)

伸筋腱損傷を防止するよう
ラウンドエッジ加工処理


プレート中央部スクリューホール
外側を 0.3 mm 幅を増やし、
ロープロファイルを維持したまま
強度を約 30%UP
(CMFiX[®] との比較)

大菱形骨にロックingsクリューが
3本挿入可能


プレート折損防止目的で
遠位部は縦2列で強固な
固定が可能

中手骨と大菱形骨を K 鋼線で仮固定したまま
プレート設置を可能とした楕円ホール
(ラグスクリューホールとしても使用可能)


プレート近位部は prebending (25°)
されたアナトミカル形状

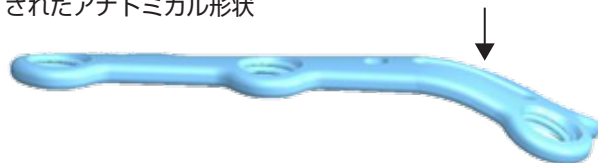

中手骨にフィットするように
プレート断面はカーブ形状

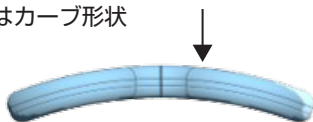

プレート断面

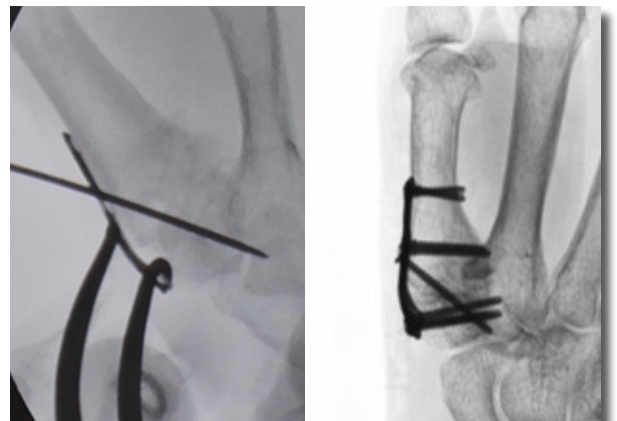

製品情報

製品番号	製品名
MHL-CMF225	CMFiX [®] 2 プレート 25°



製品番号	製品名
TLS2003 ~ TLS2023	ロッキングコーティカルスクリュー Φ 2.0mm × 3mm ~ 23mm

* 1mmピッチ



製品番号	製品名
TS2003 ~ TS2023	コーティカルスクリュー (ノンロック) Φ 2.0mm × 3mm ~ 23mm

* 1mmピッチ



【使用ドリル】

製品番号	製品名
HSD1627-ST	Φ 1.6mmソリッドドリル



販売名：マルチハンドロックシステム用スクリュードライバー
届出番号：08B1X00003000039

販売名：マルチハンドシステム手術器械セット
届出番号：08B1X00003000032

販売名：マルチハンドシステム単回使用整形外科用バー
認証番号：301AKBZX00005000

販売名：マルチハンドシステム 2.0 / 1.5
承認番号：23100BZX00100000

販売名：マルチハンドロックシステム
承認番号：30300BZX00094000



販売元

STELLA

株式会社ステラ医療企画

〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-8-9
ゼックスベルク 103 号室

TEL.043-350-0320 FAX.043-350-0321

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.stellamed.co.jp>



製造販売元

株式会社ベアー・メディック

本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子 1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041 (代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>

